

OPTICIT®

REF 331170



- ▶ Desinfectiemiddel (in poedervorm) basierend op car-roaat (60,0 %)
- ▶ Eenvoudig in gebruik door omroeren met water om de gebruiksklare oplossing te bereiden
- ▶ Ter voorbereiding de tracheacanule volgens instructie reinigen met **OPTIBRUSH® CLEAN**
- ▶ De toegepaste gebruiksklare **OPTICIT®**-desinfectieoplossing (3%) werkt bactericide (incl. MRSA), levurocide, fungicide, tuberculocide, mycobactericide, virucide (omhulde virussen zoals HBV, HCV, HIV, corona-virussen) en tegen onomhulde virussen zoals noro-virussen, adeno-virussen en polio-virussen en sporicide (C. difficile):
 - Bacteriën en Candida albicans volgens EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 (lage belasting): 1,0 % gedurende 10 min.
 - TbB (M. terrae) volgens EN 14348 en EN 14563 (lage belasting): 2,0 % gedurende 30 min.
 - Virussen (omhulde virussen zoals HBV, HCV, HIV, corona-virussen) en onomhulde virussen (noro-virussen, adeno-virussen en polio-virussen) volgens EN 14476 en EN 17111 (lage belasting): 1,0 % gedurende 10 min.
 - Schimmels (A. brasiliensis) volgens EN 13624, EN 14562 (lage belasting): 3,0 % gedurende 30 min.
 - Mycobacteriën (M. avium) volgens EN 14348 en EN 14563 (lage belasting): 3,0 % gedurende 30 min.
 - Sporen (C. difficile) volgens EN 17126 (lage belasting): 2 % gedurende 30 min.

LEVEROMVANG

OPTICIT® 100 g		REF 331170
1 x desinfectiepoeder (100 g)		
1 x maatlepel		
1 x gebruiksaanwijzing		
Optioneel verkrijgbaar:		
OPTIBRUSH® CLEAN	100 g	REF 331110
	400 g	REF 331100
OPTIBRUSH® CONT		
Reinigingsdoos	Normaal	REF 31200
	XL	REF 31300
OPTIBRUSH®		
Reinigingsborstel	Normaal	REF 31850
	Plus	REF 31855
OPTIBRUSH® SWABS	Normaal	REF 31910
	XL	REF 31920
	XL 25 cm	REF 31925



CE 0124

FAHL

OPTICIT®



Volg de gebruiksaanwijzing voor gebruik!

Gebruik

Reiniging




Hygiënemaatregelen treffen. Reinigingsmiddel en -accessoires klaarzetten. Lauwwarm water (drinkwaterkwaliteit) voorbereiden.

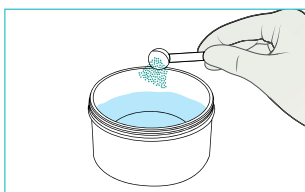


1 afgestreken maatlepel **OPTIBRUSH® CLEAN** met 350 ml water omroeren tot een reinigungsoplossing.



Spoel zowel de buiten- als binnencanule door met lauwwarm water.

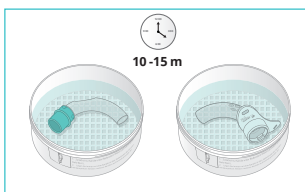

Leg de buiten- en binnencanule in de canulereinigungsdoos met de bereide reinigungsoplossing. De inwerktijd bedraagt tussen 10 - 15 min.

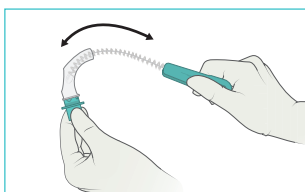

De tracheacanule wordt met de reinigungsborstel met gelijkmatige voor- en achterwaartse bewegingen van de punt naar het schild gereinigd.




Spoel zowel de buiten- als binnencanule opnieuw door met lauwwarm water.


Desinfectie




Reinig de canulereinigungsdoos. Desinfectiemiddel en -accessoires klaarzetten. Lauwwarm water (drinkwaterkwaliteit) voorbereiden.

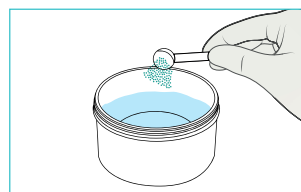


3 afgestreken maatlepels **OPTICIT®** met 350 ml water omroeren tot een desinfectieoplossing.

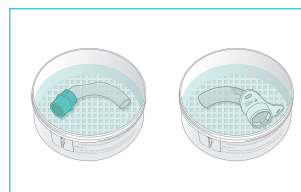


Leg de buiten- en binnencanule in de canulereinigungsdoos met de bereide desinfectieoplossing. De inwerktijd bedraagt afhankelijk van het werkingsspectrum tot 30 min.

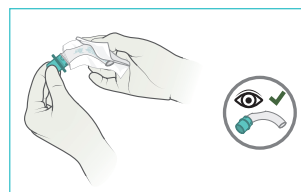

Spoel zowel de buiten- als binnencanule tot slot door met lauwwarm water. Controleer zowel de buiten- als binnencanule op integriteit. Breng een laagje stomaolie op de binnencanule aan.

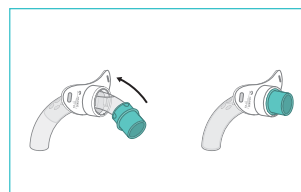

Zet de canule in elkaar. Schuif hierbij de binnencanule zo ver in de buitencanule, dat deze kan worden gefixeerd.

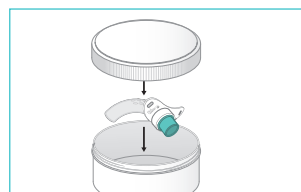

Plaats de complete tracheacanule voor opslag in de hiervoor bestemde doos.