

**LARYVOX® HME**

REF 49800



CE

REF 49801




CE 0482

REF 49802



CE 0482

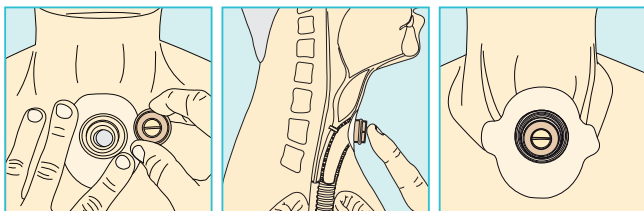

- ▶ Offenporiger PU-Schaumstoff
- ▶ Neutrales Beige, um ein unauffälliges Erscheinungsbild zu gewährleisten
- ▶ Geringes Gewicht, flaches Profil
- ▶ Stabiles Gehäuse – kann durch Fingerauflage ohne Druck verschlossen werden, um laryngektomierten Patienten mit Stimmprothese das Sprechen zu ermöglichen
- ▶ Mit Multiadapter für die Konnektierung von 15 mm-Konnektoren (**UNI**) und 22 mm-Kombiadaptoren (**KOMBI**), die den Anschluss an alle herkömmlichen Basisplatten (z.B. **LARYVOX® TAPE**) oder Silikonkanülen für Laryngektomierte (z.B. **LARYNGOTEC®**) ermöglicht.
- ▶ In drei Varianten erhältlich:
  - **REF 49800:** HME-Filter
  - **REF 49801:** O<sub>2</sub>-Konnektor
  - **REF 49802:** HME-Filter mit Sauerstoffanschluss

**LIEFERUMFANG****LARYVOX® HME REF 49800**

6 x 5 Filterkassetten  
1 x Gebrauchsanweisung

oder

**LARYVOX® O<sub>2</sub> Connect REF 49801**

5 x O<sub>2</sub>-Konnektor, einzeln verpackt  
1 x Gebrauchsanweisung

oder

**LARYVOX® O<sub>2</sub> HME REF 49802**

6 x 5 Filterkassetten  
1 x Gebrauchsanweisung