


TRACHEOSAVE PLACEHOLDER

steril

REF 20897

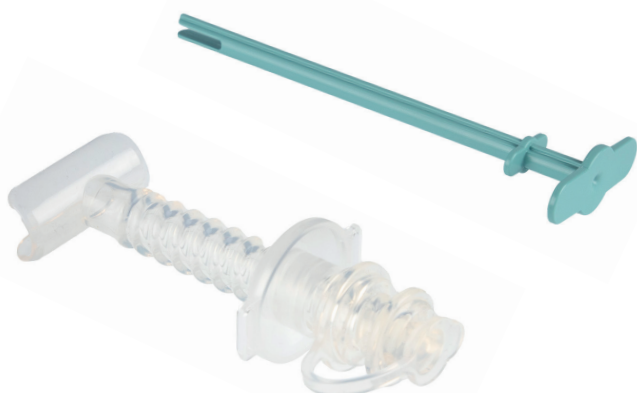

- ▶ Tracheostoma-Platzhalter zur Einführung in das Tracheostoma, zur Sicherung des Tracheostomas und zur gleichzeitigen größtmöglichen Schonung der empfindlichen Trachealschleimhaut durch Minimierung der Kontaktfläche.
- ▶ Aus weichem, medizinischem Silikon hergestellt:
 - Länge: 74 mm
 - Innendurchmesser: 8 mm
 - Außendurchmesser: 11 mm
- ▶ Besteht aus einem Kanülenrohr, das am unteren Kanülenende in eine längliche, der Trachea angepasste Halbröhre übergeht, die sich der Luftröhre anatomisch anschmiegt
- ▶ Für eine möglichst physiologische Atmung bei größtmöglichem Lumen in der Luftröhre
- ▶ Kanülenschild mit zwei seitlichen Öffnungen zum Befestigen eines Kanülentragebandes
- ▶ Mit dem verstellbaren Schild kann der Platzhalter auf die Länge des Tracheostoma-Kanals angepasst und darauf fixiert werden.
- ▶ Ein abnehmbarer Verschlussstöpsel ist am oberen (distalen) Ende des Platzhalters angebracht. Dieser ermöglicht den Verschluss des Tracheostomas beim Entwöhnen (Weaning/Dekanülierung) des Patienten von der Trachealkanüle z.B. nach Langzeitbeatmung
- ▶ Durch Abnehmen des Verschlussstöpsels ist es möglich, Trachealsekret durch das Kanülenrohr abzusaugen
- ▶ Mit beiliegender Einführhilfe für die sichere Platzierung im Tracheostoma

LIEFERUMFANG

Tracheosave Placeholder

REF 20897

- 1 x Tracheostoma-Platzhalter
- 1 x Einführhilfe
- 1 x OPTIFLAUSCH® K, Kanülentrageband
- 1 x Gebrauchsanweisung

CE 0482