

# TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68730



REF 68630

REF 60700  
(en option)

- ▶ Sonde stomique atraumatique pour l'aspiration en douceur de sécrétions trachéales
- ▶ Avec pointe arrondie pour prévenir les lésions de la trachée
- ▶ En plastique souple, flexible et transparent
- ▶ Avec orifice central et quatre orifices latéraux à l'extrémité du cathéter pour prévenir l'effet ventouse du cathéter exercé sur la paroi trachéale au cours de la procédure d'aspiration
- ▶ Une graduation à intervalles de 1 cm permet le contrôle direct de la profondeur d'introduction du cathéter d'aspiration
- ▶ Large assortiment (CH 08-16)
- ▶ Connecteurs à codage couleur
- ▶ Deux variantes de longueur : 30 cm et 50 cm
- ▶ La variante courte convient tout particulièrement à l'aspiration trachéale
- ▶ À utiliser avec le cône presse-doigt TRACHFLOW® pour contrôler la puissance d'aspiration. La tubulure d'aspiration de l'aspirateur est reliée à la sonde stomique stérile au moyen du cône presse-doigt TRACHFLOW®
- ▶ De par sa construction conique, une taille du cône presse-doigt TRACHFLOW® convient à toutes les tailles de sonde stomiques.

## CONTENU

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER  
SOFT METRIC S** **REF 68630**

- ▶ 100 x Sonde stomatale stérile et atraumatique

ou

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER  
SOFT METRIC L** **REF 68730**


- ▶ 100 x Sonde stomatale stérile et atraumatique

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!

Accessoires optionnels:

**TRACHFLOW® FINGERTIP** **REF 60700**  
(non stérile)

## INFORMATION

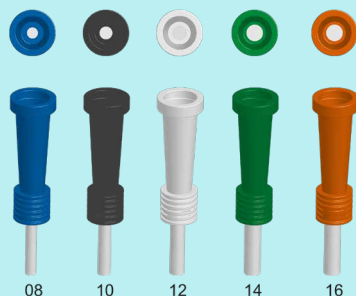

CE 0123 STERILE EO (non valable pour REF 60700)

| Les articles                              | Taille | Longueur | Shore | Couleur | Unité | REF             |
|-------------------------------------------|--------|----------|-------|---------|-------|-----------------|
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S | CH 10  | 30 cm    | A65   |         | 100   | <b>68630-10</b> |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S | CH 12  | 30 cm    | A65   |         | 100   | <b>68630-12</b> |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S | CH 14  | 30 cm    | A65   |         | 100   | <b>68630-14</b> |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S | CH 16  | 30 cm    | A65   |         | 100   | <b>68630-16</b> |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 08  | 50 cm    | A65   |         | 100   | <b>68730-08</b> |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 10  | 50 cm    | A65   |         | 100   | <b>68730-10</b> |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 12  | 50 cm    | A65   |         | 100   | <b>68730-12</b> |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 14  | 50 cm    | A65   |         | 100   | <b>68730-14</b> |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 16  | 50 cm    | A65   |         | 100   | <b>68730-16</b> |