

TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68730



REF 68630

REF 60700
(opcional)

- ▶ Catéter de traqueostoma atraumático para la aspiración cuidadosa de secreciones traqueales
- ▶ Con punta redondeada para evitar lesiones de la tráquea
- ▶ Fabricado en plástico blando, flexible y transparente
- ▶ Con orificio central y cuatro orificios laterales ("ojales") en la punta del catéter. Durante la aspiración, evitan que el catéter se adhiera a la pared traqueal
- ▶ Una graduación a distancias de 1 cm permite controlar directamente la profundidad de inserción del catéter de aspiración
- ▶ Amplio surtido (CH 08 - 16)
- ▶ Conectores codificados por color
- ▶ Dos variantes de distinta longitud: 30 cm y 50 cm
- ▶ La variante corta es especialmente apta para la aspiración traqueal
- ▶ Utilizar junto con el TRACHFLOW® Fingertip, para controlar la potencia de aspiración. El TRACHFLOW® Fingertip conecta el tubo de aspiración del aspirador con el catéter estéril de estoma. Gracias a su diseño cónico, un tamaño del TRACHFLOW® Fingertip es apto para catéteres de estoma de todas las medidas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER
SOFT METRIC S** REF 68630

- ▶ 100 Catéter de aspiración, estéril, atraumático
- o

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER
SOFT METRIC L** REF 68730


- ▶ 100 Catéter de aspiración, estéril, atraumático

Al realizar el pedido, indique el tamaño detrás del número de artículo

Disponible opcionalmente:

TRACHFLOW® FINGERTIP REF 60700
(no estéril)

INFORMACIÓN

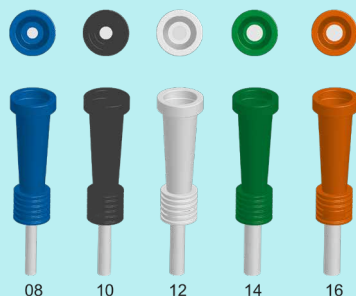

08 10 12 14 16

CE 0123 STERILE EO (no se aplica a REF 60700)

Producto	Tamaño	Longitud	Shore	Color	PU	REF
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 10	30 cm	A65		100	68630-10
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 12	30 cm	A65		100	68630-12
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 14	30 cm	A65		100	68630-14
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 16	30 cm	A65		100	68630-16
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 08	50 cm	A65		100	68730-08
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 10	50 cm	A65		100	68730-10
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 12	50 cm	A65		100	68730-12
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 14	50 cm	A65		100	68730-14
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 16	50 cm	A65		100	68730-16