

TRACHEOTEC® SILC VARIO CUFF

REF 18850



- ▶ Trachealkanüle mit Hochdruckmanschette (**CUFF**)
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Mit 15 mm Drehkonnektor (**VARIO**) um Zug- und Drehkräfte abzapuffern
- ▶ Die Hochdruckmanschette (**CUFF**) ist nicht vorgeformt und liegt im entblocken Zustand eng an der Kanüle an, was eine einfache und atraumatische Einführung der Kanüle ermöglicht
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen in der Trachea vorzubeugen

LIEFERUMFANG

TRACHEOTEC® SILC VARIO CUFF REF 18850

1 x Trachealkanüle
mit 15 mm-Drehkonnektor (**VARIO**)
1 x Obturator
1 x Kanülentrageband
1 x Kanülenpass
1 x Gebrauchsanweisung

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Optional erhältlich:

NECKFIX® K 45 cm **REF 32620**

OPTIFLUID® Stoma oil towel **REF 31550**


CE 0482



VARIO



CUFF

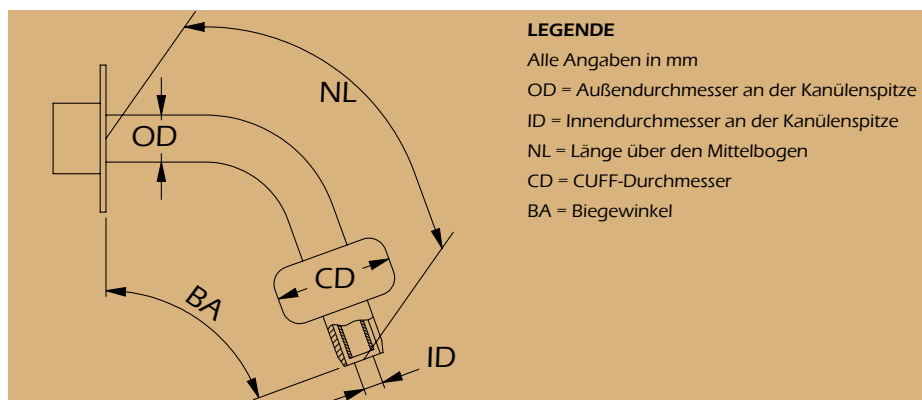

LEGENDE

Alle Angaben in mm

OD = Außendurchmesser an der Kanülenspitze

ID = Innendurchmesser an der Kanülenspitze

NL = Länge über den Mittelbogen

CD = CUFF-Durchmesser

BA = Biegewinkel

Größe	OD	ID	NL	BA	CD	REF
05	7,3	5,0	59,0	107	18,8	18850-05
06	8,7	6,0	70,0	107	20,5	18850-06
07	10,0	7,0	75,0	107	22,6	18850-07
08	11,0	8,0	81,0	108	28,2	18850-08
09	12,3	9,0	92,0	108	29,3	18850-09

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)




PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)

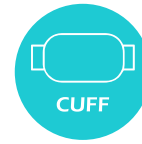

CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.