


TRACHEOSAVE PLACEHOLDER

REF 20897

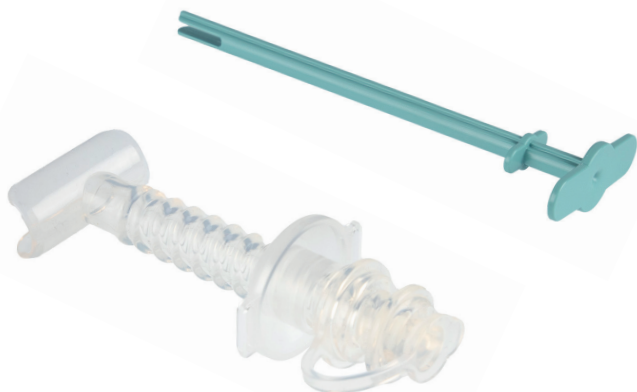

- ▶ Tracheostoma-plaatshouder om in de tracheostoma in te brengen, om de luchtwegen open te houden en tegelijkertijd het gevoelige tracheaslijmvlies zo veel mogelijk te ontzien door een minimalisering van het contactoppervlak.
- ▶ Vervaardigd van zacht silicone:
 - Lengte: 74 mm
 - Binnendiameter: 8 mm
 - Buitendiameter: 11 mm
- ▶ Bestaat uit een canulebuis, die aan het onderste uiteinde van de canule overgaat in een langwerpige, aan de trachea aangepaste halve buis, die anatomisch tegen de luchtpijp aan komt te liggen
- ▶ Voor een zo fysiologisch mogelijke ademhaling met een zo groot mogelijk lumen in de luchtpijp
- ▶ Canuleschild met twee openingen aan de zijkant voor het bevestigen van een canuledraagband
- ▶ Verstelbaar canuleschild, optimaliseert de afstand tussen halsoppervlak en luchtpijp
- ▶ Een afneembare afsluitstop is aangebracht aan het bovenste (distale) uiteinde van de plaatshouder. Hiermee kan de tracheostoma worden afgesloten tijdens het ontwennen (weaning/decanulatie) van de patiënt van de tracheacanule, bijv. na langdurige beademing
- ▶ Door het verwijderen van de afsluitstop is het mogelijk om tracheasecreet via de canulebuis af te zuigen
- ▶ Met ingesloten inbrenghulp voor veilige plaatsing in het tracheostoma

LEVERINGSOMVANG

Tracheosave Placeholder

REF 20897

- 1 x Tracheostoma-plaatshouder
- 1 x Inbrenghulp
- 1 x OPTIFLAUSCH® K, canuledraagband
- 1 x Gebruiksaanwijzing

CE 0482