


TRACHEOSAVE PLACEHOLDER

REF 20897

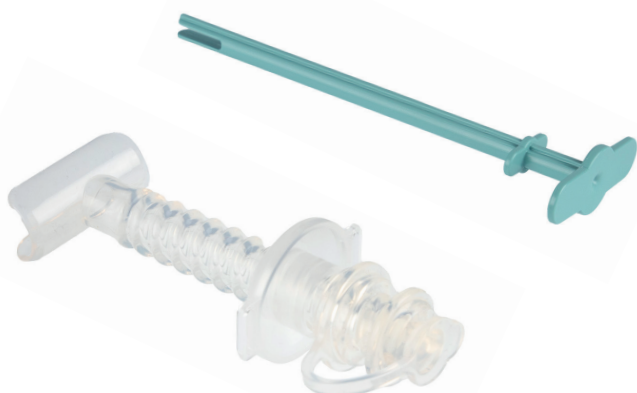

- ▶ Espaciador de traqueostoma para la inserción en el traqueostoma. Asegura la permeabilidad de las vías respiratorias y protege al máximo la mucosa traqueal sensible, minimizando la superficie de contacto.
- ▶ Fabricado en silicona blanda:
 - Longitud: 74 mm
 - Diámetro interior: 8 mm
 - Diámetro exterior: 11 mm
- ▶ Consta de un tubo de cánula que, en el extremo inferior de la cánula, se convierte en un hemitubo alargado ajustado a la tráquea, a la que se acopla anatómicamente
- ▶ Para una respiración lo más fisiológica posible con el mayor lumen posible en la tráquea
- ▶ Escudo de cánula con dos orificios laterales para fijar una cinta de fijación de la cánula
- ▶ Escudo de cánula ajustable, optimiza la distancia entre la superficie del cuello y la tráquea
- ▶ El extremo superior (distal) del espaciador lleva un tapón obturador desmontable.
- ▶ Este permite obturar el traqueostoma durante la deshabitación (retirada/decanulización) del paciente de la cánula traqueal, p. ej., tras la respiración asistida prolongada
- ▶ Al retirar el tapón obturador se aspiran las secreciones traqueales a través del tubo de cánula
- ▶ Con ayuda de inserción incluida para una colocación segura en el traqueostoma

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Tracheosave Placeholder

REF 20897

- 1 Espaciador de traqueostoma
- 1 Ayuda de inserción
- 1 OPTIFLAUSCH® K, Cinta de fijación de la cánula
- 1 Instrucciones de uso

CE 0482