

TRACHEOTEC® SILC VARIO CUFF

REF 18850




VARIO



CUFF

- ▶ Canule trachéale avec ballonnet haute pression (**CUFF**)
- ▶ Colletette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Avec connecteur rotatif de 15 mm (**VARIO**) permettant de compenser les forces de traction et de torsion susceptibles d'être provoquées par la tubulure de ventilation
- ▶ Le ballonnet haute pression (**CUFF**) n'est pas préformé et est positionné contre la canule quand il est dégonflé, ce qui permet une introduction simple et atraumatique de la canule
- ▶ Embout de canule arrondie permettant de prévenir les irritations de la muqueuse trachéale
- ▶ La valve à ballonnet dispose d'un codage couleur qui varie en fonction de la taille de la canule (cf. tableau ci-dessous)
- ▶ Le set contient une bande de fixation de canule, un obturateur et une carte d'identification de canule

CONTENU	
TRACHEOTEC® SILC VARIO CUFF	RÉF 18850
1 x Canule trachéale avec connecteur rotatif de 15 mm (VARIO)	
1 x Obturateur	
1 x Lanière de fixation de canule	
1 x Passeport de canule	
1 x Mode d'emploi	
Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande !	
Disponibles en option :	
NECKFIX® K 45 cm	REF 32620
OPTIFLUID® Stoma oil towel	REF 31550
CE 0482	

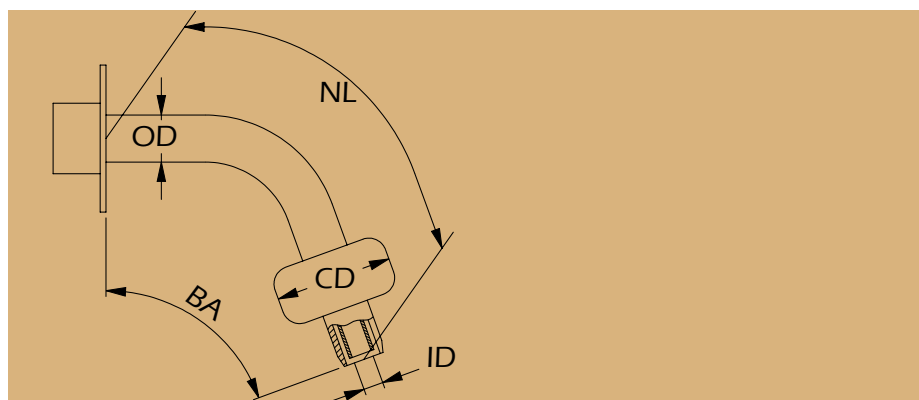

Taille	OD	ID	NL	BA	CD	REF
05	7,3	5,0	59,0	107	18,8	18850-05
06	8,7	6,0	70,0	107	20,5	18850-06
07	10,0	7,0	75,0	107	22,6	18850-07
08	11,0	8,0	81,0	108	28,2	18850-08
09	12,3	9,0	92,0	108	29,3	18850-09

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)




PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)

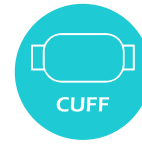

CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.