

TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68730



REF 68630

REF 60700
(optioneel)

- ▶ Atraumatische tracheostoma-katheter voor het behoedzaam afzuigen van tracheasecreet
- ▶ Met afgeronde punt, om verwonding van de luchtpijp uit te sluiten
- ▶ Van zachte, flexibele en transparante kunststof
- ▶ Met centrale opening en vier openingen aan de zijkant ("ogen") van de katheterpunt, om te verhinderen dat de katheter zich tijdens het afzuigen vastzuigt aan de tracheawand
- ▶ Een schaalverdeling met afstanden van 1 cm biedt directe controle over de inbrengdiepte van de afzuigkatheter
- ▶ Groot assortiment (CH 08 - 16)
- ▶ Connectors met kleurcodering
- ▶ Twee lengtevarianten: 30 cm en 50 cm
- ▶ De korte variant is bijzonder geschikt voor tracheaal afzuigen
- ▶ Te gebruiken in combinatie met de TRACHFLOW® vingertip, om de afzuigkracht te reguleren. Door middel van de TRACHFLOW® vingertip wordt de afzuigslang van het afzuigapparaat verbonden met de steriele stoma-katheter. Dankzij de conische constructie past één maat op alle maten van de stoma-katheter

LEVEROMVANG

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER
SOFT METRIC S** REF 68630

- ▶ 100 x Afzuigkatheter, steriel, atraumatic
- of

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER
SOFT METRIC L** REF 68730


- ▶ 100 x Afzuigkatheter, steriel, atraumatic

Bij bestelling de maat aangeven!

Optioneel verkrijgbaar:

TRACHFLOW® FINGERTIP REF 60700
(unsteriel)

INFORMATION

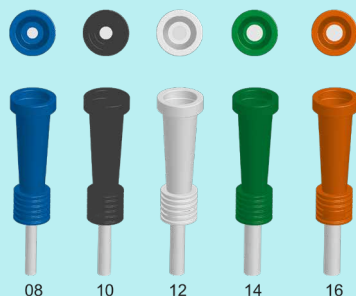

CE 0123 STERILE EO (geldt niet voor REF 60700)

Produkt	Maat	Lengte	Shore	Kleur	PU	REF
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 10	30 cm	A65		100	68630-10
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 12	30 cm	A65		100	68630-12
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 14	30 cm	A65		100	68630-14
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 16	30 cm	A65		100	68630-16
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 08	50 cm	A65		100	68730-08
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 10	50 cm	A65		100	68730-10
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 12	50 cm	A65		100	68730-12
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 14	50 cm	A65		100	68730-14
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 16	50 cm	A65		100	68730-16