


TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68000



REF 60700 (opcional)

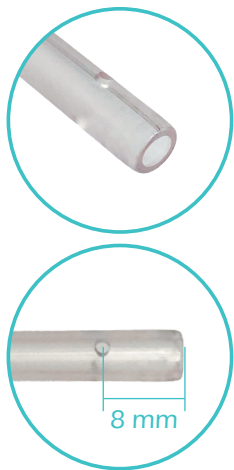

- ▶ Catéter de estoma para la aspiración cuidadosa de secreciones traqueales
- ▶ Fabricado en plástico blando, flexible y transparente
- ▶ Con orificio central y cuatro orificios laterales ("ojales") en la punta del catéter. Durante la aspiración, evitan que el catéter se adhiera a la pared traqueal
- ▶ Una graduación a distancias de 1 cm permite controlar directamente la profundidad de inserción del catéter de aspiración
- ▶ Amplio surtido (CH 06 - 18)
- ▶ Conectores codificados por color
- ▶ Dos longitudes diferentes disponibles: 25 cm y 50 cm (la versión corta es especialmente adecuada para la aspiración traqueal)
- ▶ Utilizar junto con el TRACHFLOW® Fingertip, para controlar la potencia de aspiración. El TRACHFLOW® Fingertip conecta el tubo de aspiración del aspirador con el catéter estéril de estoma. Gracias a la construcción cónica, un tamaño es apto para catéteres de estoma de todas las medidas

VOLUMEN DE SUMINISTRO


TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric S **REF 68100**
30 Catéter de aspiración, estéril

O
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric L **REF 68000**
30 Catéter de aspiración, estéril

Al realizar el pedido, indique el tamaño detrás del número de artículo.

Disponible opcionalmente:
TRACHFLOW® FINGERTIP **REF 60700**
(no estéril)

INFORMACIÓN

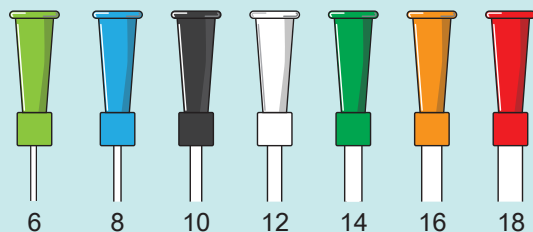

CE 0044 **STERILE EO** (no se aplica a REF 60700)

Producto	Tamaño	Longitud	Shore	PU	REF
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 06-18	25 cm	A70	30	68100-xx
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 06-18	50 cm	A70	30	68000-xx