

TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68000



REF 60700 (en option)



- ▶ Sonde stomatale stérile pour l'aspiration en douceur de la sécrétion trachéale
- ▶ En plastique souple, flexible et transparent
- ▶ Avec orifice central et quatre orifices latéraux à l'extrémité du cathéter pour prévenir l'effet ventouse du cathéter exercé sur la paroi trachéale au cours de la procédure d'aspiration
- ▶ Une graduation à intervalles de 1 cm permet le contrôle direct de la profondeur d'introduction du cathéter d'aspiration
- ▶ Large assortiment (CH 6-18)
- ▶ Connecteurs à codage couleur
- ▶ Deux variantes de longueur : 25 cm et 50 cm (la variante courte convient tout particulièrement à l'aspiration trachéale)
- ▶ À utiliser avec le cône TRACHFLOW® Fingertip pour contrôler la puissance d'aspiration. La tubulure d'aspiration de l'aspirateur est reliée à la sonde stomique stérile au moyen du cône TRACHFLOW® Fingertip. De par sa construction conique, une taille du cône presse-doigt TRACHFLOW® convient à toutes les tailles de sonde stomique

CONTENU

TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric S **REF 68100**

1 x Sonde stomatale stérile et atraumatique


ou
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric L **REF 68000**

1 x Sonde stomatale stérile et atraumatique

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!

Accessoires optionnels:
TRACHFLOW® FINGERTIP **REF 60700**
(non stérile)

INFORMATION

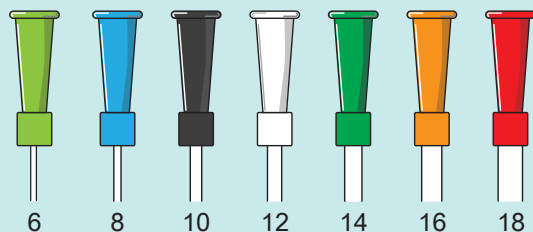

CE 0044 STERILE EO (non valable pour REF 60700)

Les articles	Taille	Longueur	Shore	Unité	REF
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 06-18	25 cm	A70	30	68100-xx
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 06-18	50 cm	A70	30	68000-xx