


TRACHEOSAVE PLACEHOLDER

REF 20897

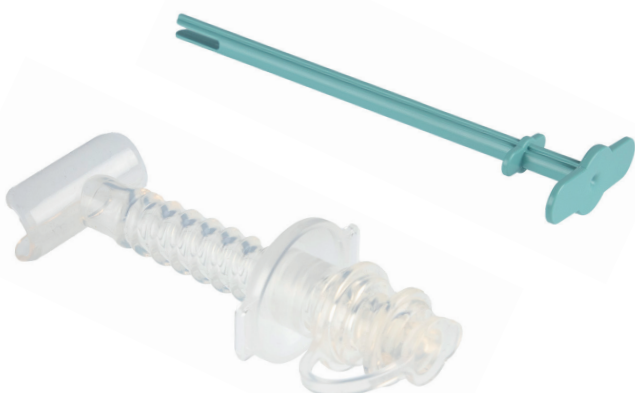

- ▶ Ecarteur de trachéostome destiné à sécuriser des voies respiratoires et à préserver l'ouverture la de la muqueuse trachéale sensibilisée par le rétrécissement de la surface de contact.
- ▶ Fabriqué en silicone souple :
 - Longueur : 74 mm
 - Diamètre intérieur : 8 mm
 - Diamètre extérieur : 11 mm
- ▶ Se compose d'un tube de canule qui est prolongé à son extrémité inférieure par un demi-tube allongé adapté à la trachée
- ▶ Pour une respiration aussi physiologique que possible avec la plus grande lumière possible dans la trachée
- ▶ Colletette de canule avec deux orifices latéraux pour l'introduction de la bande de fixation
- ▶ Colletette de canule réglable, optimise l'écart entre la surface du cou et la trachée
- ▶ Un bouchon amovible est inséré à l'extrémité supérieure (distale) du tube. Il permet l'obturation du trachéostome lors du sevrage (désaccoutumance) du patient de la canule trachéale, notamment après une ventilation prolongée.
- ▶ Le retrait de l'obturateur permet d'aspirer les sécrétions trachéales à travers le tube
- ▶ Avec aide à l'insertion fournie pour une mise en place sûre dans la trachéotomie

CONTENU

Tracheosave Placeholder

REF 20897

- 1 x Ecarteur de trachéostome
- 1 x Aide à l'insertion
- 1 x OPTIFLAUSCH® K, Kanülentrageband
- 1 x Mode de emploi

CE 0482