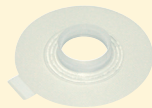
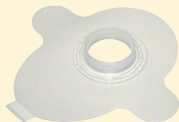
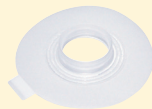
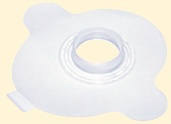
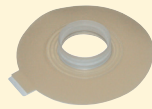
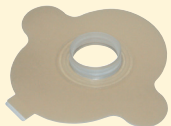
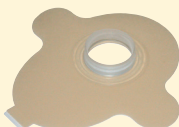
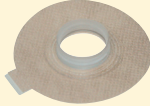
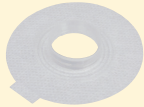
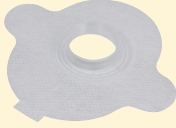


GAMME LARYVOX® TAPE

Référence	Nom	Illustration	Caractéristiques
48100	LARYVOX® TAPE STANDARD ROUND		- Le support adhésif est transparent et avec effet hydrophobe - Les propriétés adhésives garantissent un bon maintien - Adapté aux trachéostomes dont la forme ne pose pas de problèmes particuliers et à la texture de peau normale
48200	LARYVOX® TAPE STANDARD OVAL		
48300	LARYVOX® TAPE STANDARD XL OVAL		
48120	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE ROUND		- Se compose d'un matériau souple semblable à du textile et à forte adhérence - Les propriétés particulières du matériau simplifient la manipulation notamment en cas de fixation sur des trachéostomes problématiques - Convient tout particulièrement en cas d'activité physique en raison de sa bonne adhérence
48220	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE OVAL		
48320	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE XL OVAL		
48130	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT ROUND		- Matériau souple et hypoallergénique à base d'hydrocolloïde - Très grand confort de fixation - Capacité de l'hydrocolloïde à absorber des liquides/sécrétions pour préserver globalement l'hydratation de la peau - Convient particulièrement à la peau sensible - Pas de risque de lésions ou d'irritations cutanées lors du retrait du support adhésif
48230	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT OVAL		
48330	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT XL OVAL		

Référence	Nom	Illustration	Caractéristiques
48140	LARYVOX® TAPE COMFORT ROUND		• Matériau fin, respirant et de couleur chair qui offre des propriétés d'adhérence optimales ainsi qu'une grande discrétion
48240	LARYVOX® TAPE COMFORT OVAL		• Sa grande flexibilité simplifie la manipulation, notamment lors de la prise en charge de trachéostomes complexes • S'adapte à la peau et permet ainsi une durée de port prolongée, en particulier en cas de mouvements autour du trachéostome
48340	LARYVOX® TAPE COMFORT XL OVAL		• Convient de manière optimale en cas d'activité physique
48050	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN ROUND		• Convient particulièrement à la peau sensible
48150	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN OVAL		• Réduit la survenue de réactions cutanées allergiques • S'adapte confortablement aux mouvements
48250	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN XL OVAL		• Très bonne adhérence • Flexibilité élevée et fixation longue durée
48400	LARYVOX® TAPE EXTRA FINE		• Forme : rectangulaire • Très bonne adhérence • Support transparent très fin • Matériau hydrophobe • Recouvre une grande superficie autour du trachéostome • S'adapte très bien aux mouvements de la zone du cou • Aspect discret
48500	LARYVOX® TAPE CONVEX		• Convient à un positionnement précis en cas de trachéostome profond ou approfondi • Le support en nid d'abeilles offre une structure globale solide • Réduit la survenue de réactions cutanées allergiques • Transparent • Matériau hydrophobe • Très bonne adhérence • Uniquement adapté à une utilisation avec une valve de phonation sans manipulation

Votre distributeur:

T-STOMA

Quai des Péniches, 69 - 19G - 1000 Bruxelles
mail info@t-stoma.eu - www.t-stoma.eu

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a - 51149 Köln - Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 - Germany - mail vertrieb@fahl.de - www.fahl.de