


TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

2 IC

REF 18932

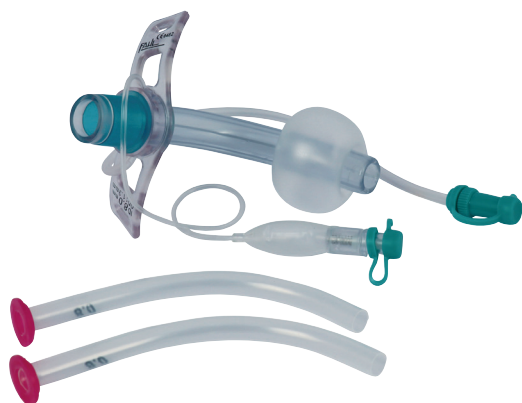

- ▶ Cánula traqueal con dos cánulas interiores (IC), manguito de baja presión (**CUFF**) y función de aspiración (**SUCTION**).
- ▶ Placa de la cánula blanda y flexible con las especificaciones principales de la cánula impresas
- ▶ Con conector giratorio de 15 mm (**VARIO**) para amortiguar las fuerzas de tracción y torsión que pueda generar el tubo de ventilación
- ▶ Con líneas de contraste radiopacas
- ▶ Disponible en tallas 6.5 / 7 / 8 / 9 y 10
- ▶ El kit incluye una cinta de fijación de la cánula, un obturador y un carné de cánula
- ▶ Las cánulas interiores (**REF 18933**) también se pueden pedir por separado, el tamaño debe ser seleccionado de acuerdo con la cánula exterior **TRACHEOTEC® PRO**.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

TRACHEOTEC® PRO
VARIO CUFF SUCTION 2 IC **REF 18932-xx**

- 1 cánula traqueal con CUFF y función de aspiración (SUCTION)
- 2 cánula interior (IC)
- 1 cinta de fijación de la cánula
- 1 obturador
- 1 carnet de cánula
- 1 instrucciones de uso

Al realizar el pedido, indique el tamaño que figura detrás del número de artículo. Encontrará la tabla de tamaños en el anexo.



VARIO



CUFF



SUCTION


CE 0482

TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

2 IC

ESQUEMA TÉCNICO

REF 18932

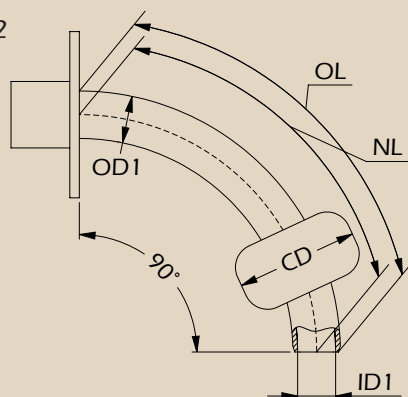

TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

REF 18932-xx

Tamaño	OD1	ID1	CD	NL	OL
065	9,3	6,5	22,0	65,8	73,5
07	10,0	7,0	30,0	68,7	77,0
08	11,3	8,0	30,0	78,5	87,9
09	12,7	9,0	30,0	84,4	94,9
10	14,0	10,0	30,0	93,7	105,3

Leyenda

Todas las indicaciones en mm

OD1 = diámetro exterior en el escudo de la cánula

ID1 = diámetro interior en la punta de la cánula exterior

CD = diámetro de CUFF

NL = longitud de la curvatura central

OL = longitud de la curvatura exterior

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)




PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	15 mm vridkoppling (VARIO) (VARIO)

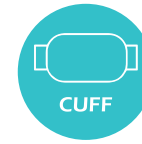

CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.